




 | adeptmedical.com

ADEPT

Medical
Supporting you

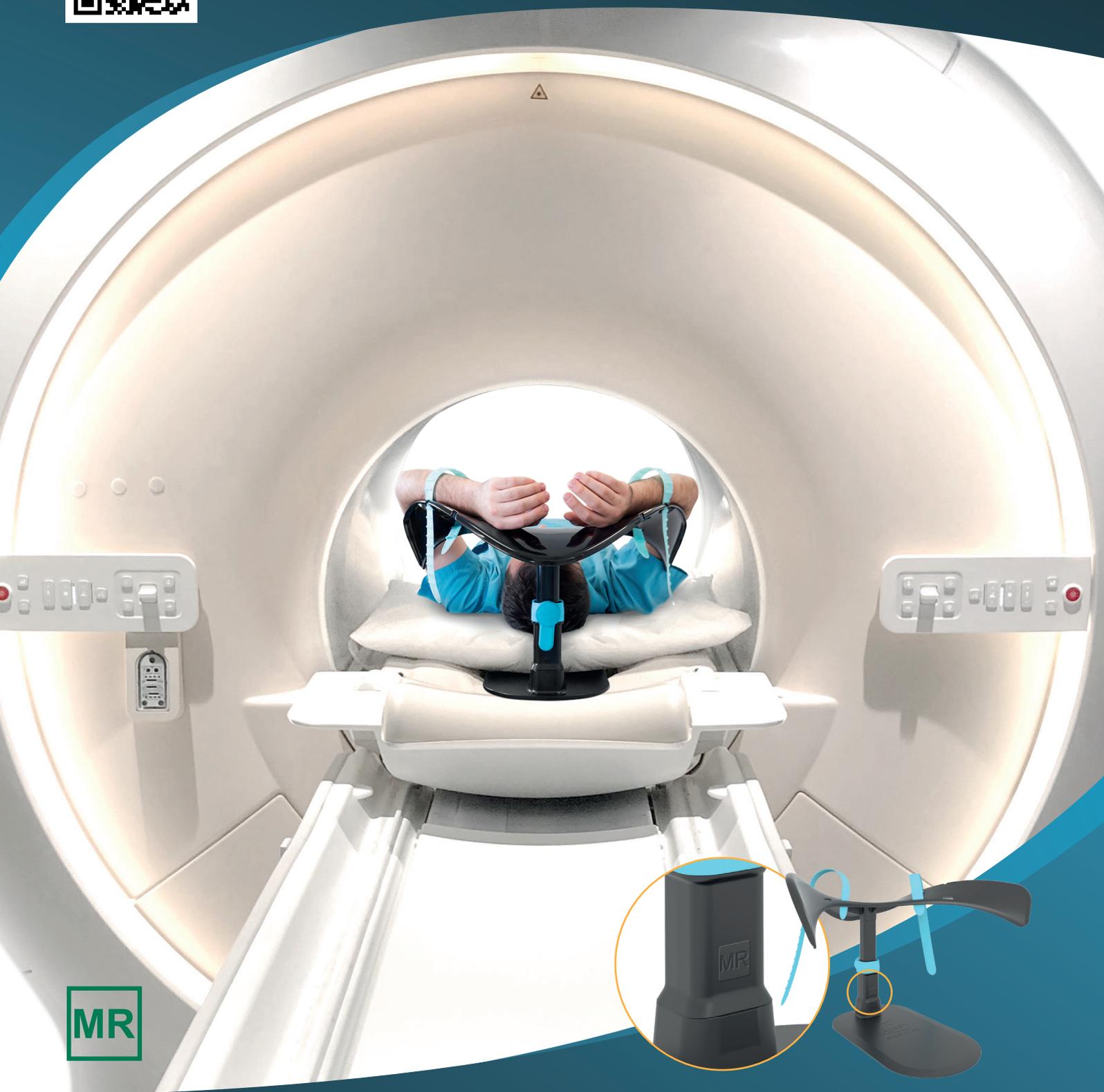

MR

Geeignet für MRT


OVERHEAD ARM SUPPORT

Für besseren Zugang und Bildgebung.

Geeignet für MRT

OVERHEAD ARM SUPPORT

Für besseren Zugang und Bildgebung.

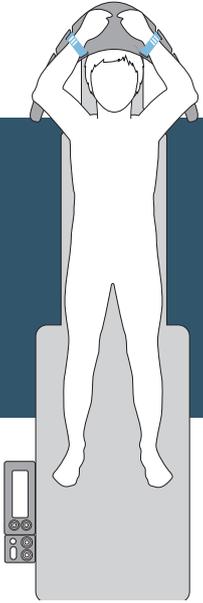

Der **jetzt MRT geeignete** Overhead Arm Support von Adept Medical ist die ideale Lösung für die Patientenpositionierung und das Patientenmanagement bei der Bildgebung mit Magnetresonanz-, C-Bogen- und CT-Tomographen.



Er ist so konzipiert, dass sie die Arme des liegenden Patienten bequem stützt, eine extreme Schulterbeugung verhindert, den Zugang zum Bauchraum ermöglicht und unerwünschte Artefakte bei der Bildgebung beseitigt. Dieses vielseitige Gerät unterstützt einen oder beide Arme in der Rückenlage und einen einzelnen Arm, wenn er in der posterioren Schräglage verwendet wird.

Der Overhead Arm Support bietet eine einfache Handhabung für den Bediener und erleichtert den Patientenkomfort und die Wiederholbarkeit des Bildgebungsverfahrens.



Platzierung und Höhenverstellung

Das Einsetzen, Positionieren, Einstellen und Entfernen kann in jeder Phase des Verfahrens erfolgen. Das Daggerboard wird entweder unter oder über der Liegenauflage positioniert und wird durch das Gewicht des Patienten stabil gehalten. Die Höheneinstellung kann mit einer Einhand-Hebelarretierung in eine optimale Position gebracht werden. Die Arme des Patienten werden sicher gehalten, und der Support ist für Patienten unter Vollnarkose oder solche, die während des Verfahrens einschlafen könnten, geeignet.



Fixierungs- und Positionierungsmöglichkeiten

Weiche, biegsame, latexfreie Polyurethan-Gurte können für zusätzliche Sicherheit und Komfort des Patienten verwendet werden. Die Gurte lassen sich leicht anbringen und so einstellen, dass sie den Arm des Patienten locker umschließen. Zwei Gurtbefestigungspositionen für jeden Arm ermöglichen Flexibilität bei der Berücksichtigung eines IV-Zugangs. Die Arme des Patienten werden vollständig gestützt, wodurch das Risiko einer Armverschiebung verringert und die Sicherheit und der Komfort des Patienten erhöht werden.



Hauptmerkmale und Vorteile

- | Geeignet für MRT
- | Ermöglicht die Bildgebung des Bauchraums
- | Entfernt unerwünschte Artefakte
- | Schnelles Anbringen und Einrichten
- | Optionale Sicherheitsgurte
- | Patientenkomfort
- | Passend für alle Tische
- | Passend für verschiedene Patientengrößen

Technische Angaben





Produktgewicht

Anwendung

- MRT/ C-Bogen/ CT-Bildgebung
- Perkutanes transhepatisches Cholangiogramm
- Cholezystomie
- Iliaca-Arterien-Stenting
- TACE (Transarterielle Chemoembolisation)

Der Overhead Arm Support wurde für die Verwendung mit vorhandenen Labor- und Bildgebungsgeräten entwickelt und passt in eine Tunnelöffnung eines CT- und MRT-Bildgebungszentrums von 70 cm und kann mit jedem C-Bogen-Bildgebungszentrum verwendet werden.

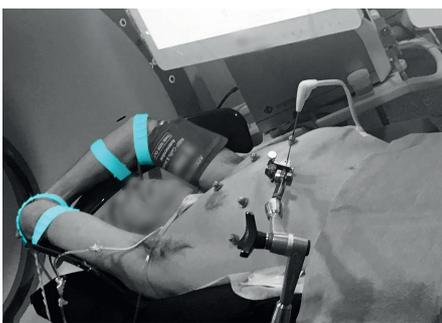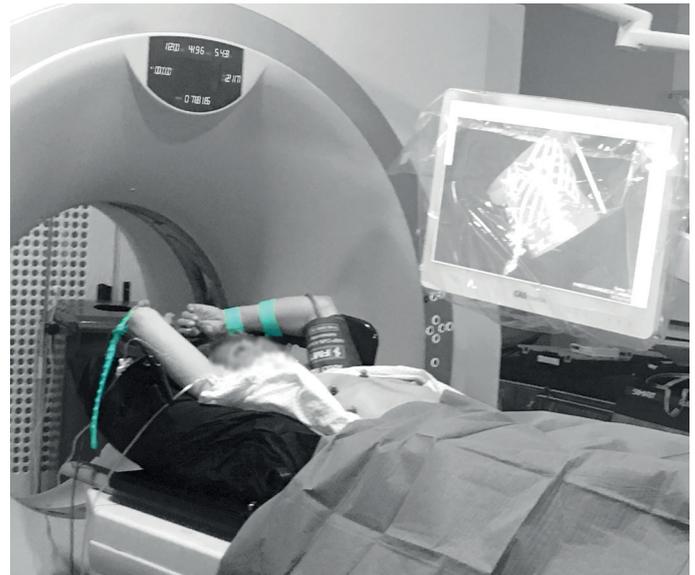

Der Overhead Arm Support mit dem **Produktcode AM2000** enthält eine innenliegende Metallfeder und ist **NICHT MRT-kompatibel**.



Der Overhead Arm Support mit dem **Produktcode AM4000** hat die MRT-Kompatibilitätsprüfung bestanden und kann sicher als Patientenstütze in einer MRT-Bildgebungsanlage mit einem Tunneldurchmesser von 70 cm und größer verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass alle MRT-Sicherheitsüberprüfungen vor der Verwendung durchgeführt wurden.



EU-Vertretung
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Die Niederlande



Hersteller
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Neuseeland