




 | adeptmedical.com

ADEPT

Medical
Supporting you

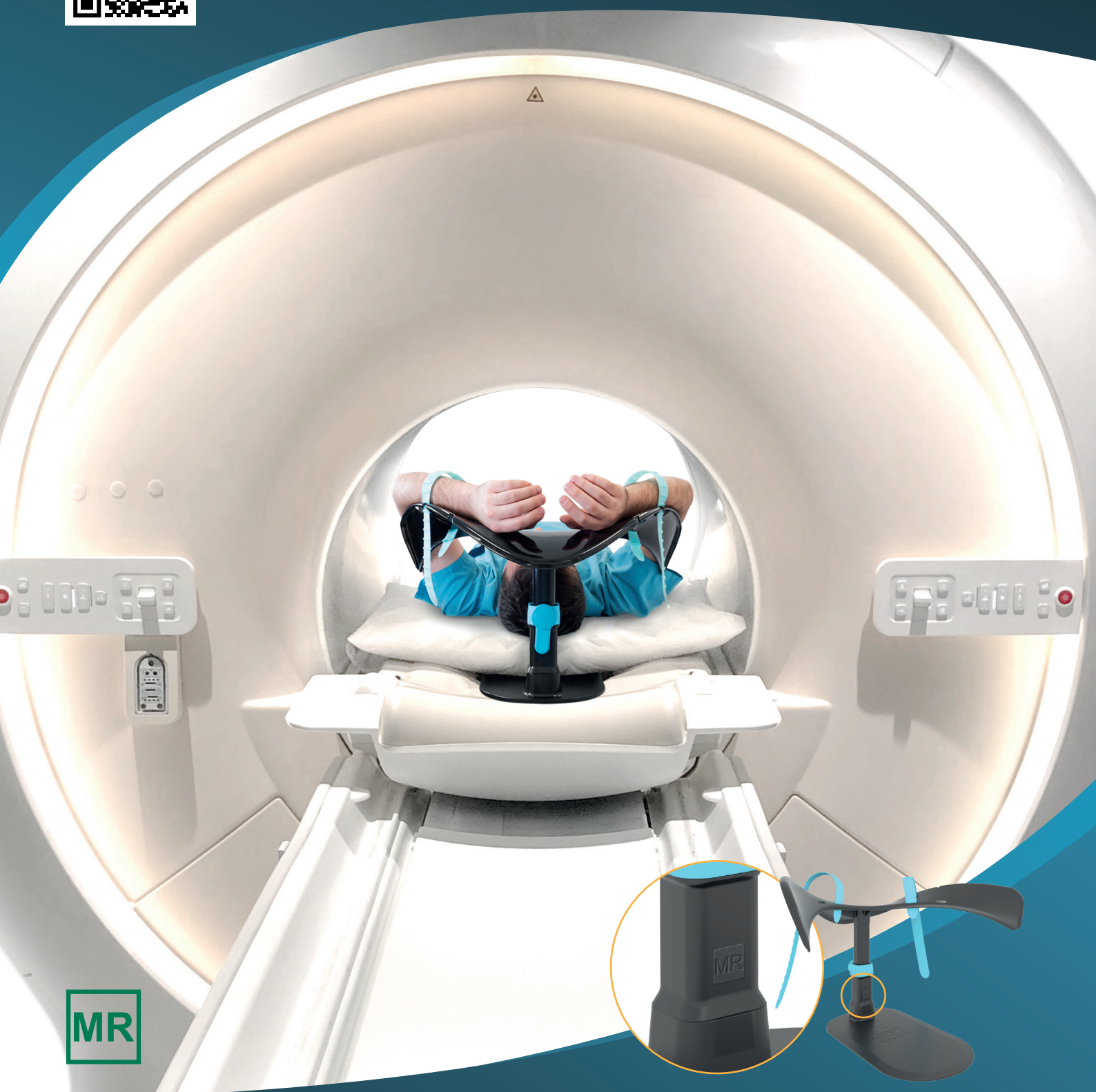

MR

Nu MR-veilig


OVERHEAD ARM SUPPORT

Voor betere toegang en beeldvorming.


Nu MR-veilig

OVERHEAD ARM SUPPORT

Voor betere toegang en beeldvorming.

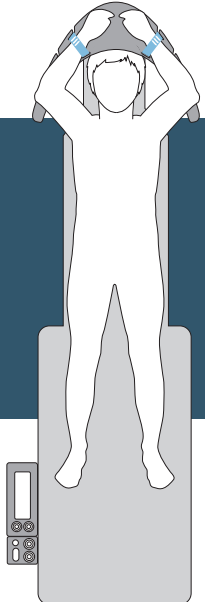

Nu MR-veilig; de Adept Medical Overhead Arm Support is de ideale oplossing voor de positionering en begeleiding van de patiënt tijdens magnetische resonantie, C-arm en CT-beeldvorming.

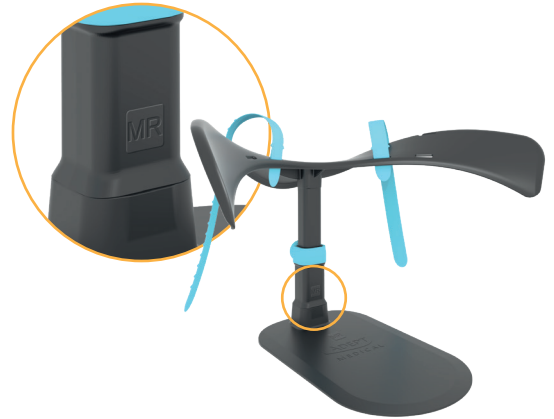

Ontworpen om de armen van de patiënt in rugligging comfortabel te ondersteunen, extreme schouderflexie te elimineren, abdominale toegang mogelijk te maken en ongewenste artefacten bij beeldvorming te verwijderen. Dit veelzijdige hulpmiddel ondersteunt één of beide armen in rugligging en één arm bij gebruik in posterieure schuine stand.

De Overhead Arm Support biedt gebruiksgemak voor de bediener en vergemakkelijkt het comfort van de patiënt en de herhaalbaarheid van de procedure.



Plaatsing en hoogte-instelling

Plaatsing, positionering, aanpassing en verwijdering kunnen in elk stadium van de procedure plaatsvinden. De daggerboard wordt onder of boven de matras geplaatst en wordt stabiel gehouden door het gewicht van de patiënt. Deze is in hoogte verstelbaar en kan met een éénhandige hendelvergrendeling in een optimale stand worden gezet. De armen van de patiënt worden stevig vastgehouden en de steun is geschikt voor patiënten onder algehele anesthesie of patiënten die tijdens een procedure in slaap kunnen vallen.



Omsnoerings- en positioneringsopties


Zachte, buigzame, latexvrije polyurethaanriemen kunnen worden gebruikt voor extra veiligheid en comfort van de patiënt. De riemen zijn gemakkelijk te plaatsen en te verstellen om de arm van de patiënt losjes te omsluiten. Twee bevestigingspunten voor de riem per arm bieden flexibiliteit bij het overwegen van IV-toegang. De armen van de patiënt worden volledig ondersteund, waardoor het risico van verplaatsing van de armen wordt verminderd en de patiënt meer zekerheid en comfort heeft.



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- | MR-veilig
- | Maakt abdominale toegang mogelijk
- | Verwijdert ongewenste artefacten
- | Snelle plaatsing en installatie
- | Optionele veiligheidsriemen
- | Comfort voor de patiënt
- | Past op alle tafels
- | Geschikt voor verschillende maten van patiënten

Specificaties

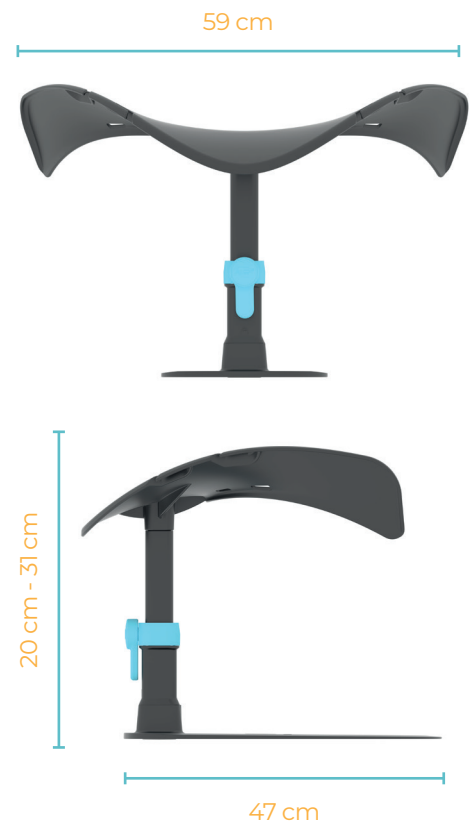


1,5 kg

Productgewicht

Toepassingen

- MR/C-arm/CT-beeldvorming
- Percutaan transhepatisch cholangiogram
- Cholecystostomie
- Plaatsing van een stent in de iliacaal slagader
- TACE

De Overhead Arm Support is ontworpen voor gebruik met bestaande laboratorium- en beeldvormingsapparatuur en past in de opening van 70 cm van een CT- en MRI-centrum en kan worden gebruikt met elk C-arm beeldvormingscentrum.

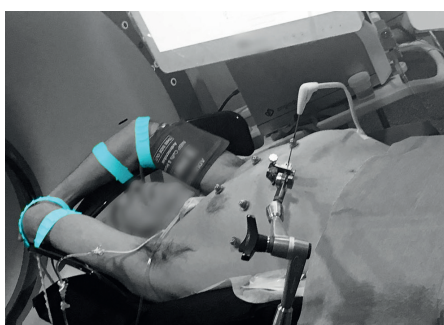

Overhead Arm Support met de **productcode AM2000** bevat een interne metalen veer en IS NIET MRI-compatibel.



Overhead Arm Support met de **productcode AM4000** heeft de MRI-compatibiliteitstest doorstaan en is veilig te gebruiken als steun voor een patiënt in een MRI-scanner met een opening van 70 cm en groter. Zorg ervoor dat alle MRI-veiligheidscontroles vóór gebruik zijn uitgevoerd.



EG-vertegenwoordiger
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Nederland



Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland