


IR SYSTEM

Adept Medical stellt das IR-SYSTEM vor. Es besteht aus dem Adept STARBoard, einer Verlängerung sowie dem IR-Schild und ist eine komplette, speziell für klinische Zwecke entwickelte Lösung für linksseitige radiale Eingriffe.

Das IR-System ermöglicht Patienten einen beispiellosen Komfort und Ärzten eine einfache Handhabung. Das IR-System ist so konzipiert, dass es mit jedem Tisch für radiologische Eingriffe kompatibel ist. Darüber hinaus lässt es sich schnell installieren und an unterschiedliche Patientengrößen anpassen. Der Aufbau erfolgt in Sekundenschnelle und es sind keine Verbrauchsmaterialien erforderlich.

STARBOARD

Eine wesentliche Eigenschaft des STARBoards ist die Fähigkeit, das Handgelenk des Patienten während des Zugangs in überstreckter Position zu halten und es anschließend einfach für die Dauer des Eingriffs in eine entspanntere, medial rotierte Position zu bringen, wodurch ein höherer Patientenkomfort ermöglicht wird.

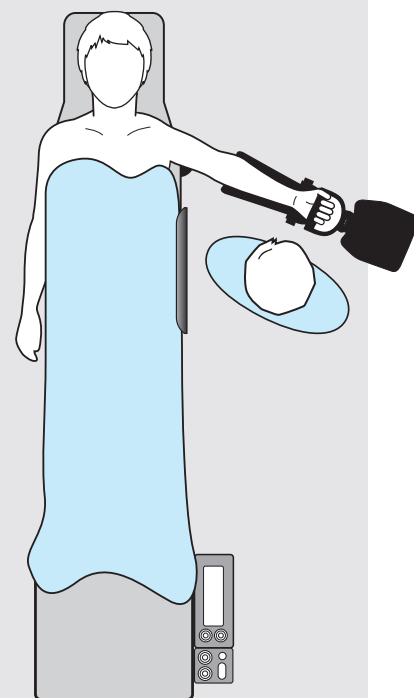

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Schneller Aufbau

Einfache Positionierung

Patientenkomfort

Abschirmung gegen
Streustrahlung

Passend für alle Tische

Strahlendurchlässige
Kohlefaser

Die voll bewegliche Armstütze passt sich allen Patientengrößen und -physiologien sowie jeder Armhaltung an, ohne dass der Arm zur Einstellung gelöst werden muss. So kann sich der Operateur während des Eingriffs an der gewünschten Stelle positionieren, ohne dass dadurch der Patientenkomfort beeinträchtigt wird.

Durch die einstellbaren Kegel-Gleitlager und Kugelgelenke können die Teile rotieren und gleiten, bleiben dabei jedoch stets in der eingestellten Position.

Das STARBoard wird aus Kohlefaser gefertigt und zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Strahlendurchlässigkeit und Langlebigkeit aus. Zudem ist es extrem leicht und kompakt.




IR SHIELD


Das IR-Schild kann in Sekundenschnelle in die optimale Position gebracht werden, um den Arzt vor Streustrahlung zu schützen. Einen vollständigen Strahlungsbericht finden Sie auf

www.adeptmedical.com/ir-system

Einstellung der Null-Portalkippung durch den Operateur - Ohne Schirm

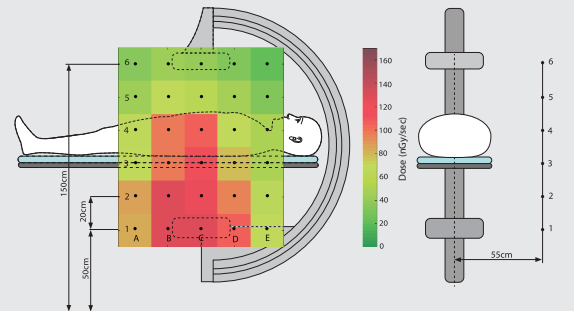

Einstellung der Null-Portalkippung durch den Operateur - Mit Schirm

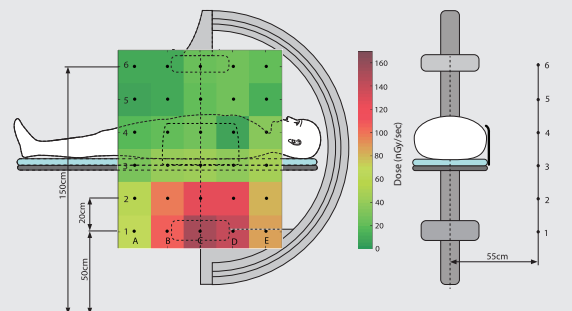

EXTENSION TRAY

Die aufsteckbare STARBoard-Verlängerung Brett leitet Ihren Führungsdraht von der radialen Zugangsstelle zu Ihrem Abdeckwagen und bietet darüber hinaus eine stabile Arbeitsfläche für die Handhabung des Drahtes.



WAGEN

VERLÄNGERUNG


STARBOARD

EC REP



EC VERTRETER

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

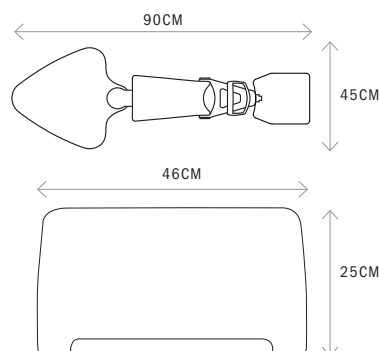

SPEZIFIKATIONEN

STARBoard + Extension Tray
Produktcode: AM0180

IR Shield
Produktcode: AM0500

STARBoard gewicht: 0.8Kg
Extension Tray gewicht: 0.1Kg
IR Shield gewicht: 1.5Kg

Weitere Informationen finden Sie auf
www.adeptmedical.com/ir-system