


ANTEGRADE IR PLATFORM

Una superficie de trabajo ideal para el abordaje femoral anterógrado.

La plataforma Antegrade IR Platform ofrece una superficie de trabajo estable, radiotransparente, de altura y longitud adecuadas, que proporciona beneficios clínicos a la práctica actual de colocar equipos de procedimientos sobre el colchón y el paciente. Es la solución definitiva para la manipulación del catéter/alambre guía, ya que presenta una gran área de superficie alineada de forma práctica con el sitio de la arteria femoral para sostener el equipo durante una intervención.

La parte estrecha se extiende a lo largo del paciente hacia la arteria femoral, ofreciendo una plataforma estable para que el médico apoye las muñecas durante la manipulación del alambre. Las patas se pueden ajustar a la altura adecuada y bloquear durante la intervención, asegurando una superficie de trabajo estable. Si se requiere un área de superficie de trabajo más larga, se puede colocar la extensión opcional en el extremo de la plataforma, lo que permite al usuario trabajar desde la misma superficie de trabajo lado a lado.

Fabricada con compuestos de fibra de carbono y plásticos de ingeniería de alto rendimiento, la Antegrade IR Platform es resistente a la vez que liviana y tiene una alta resistencia al ataque químico.

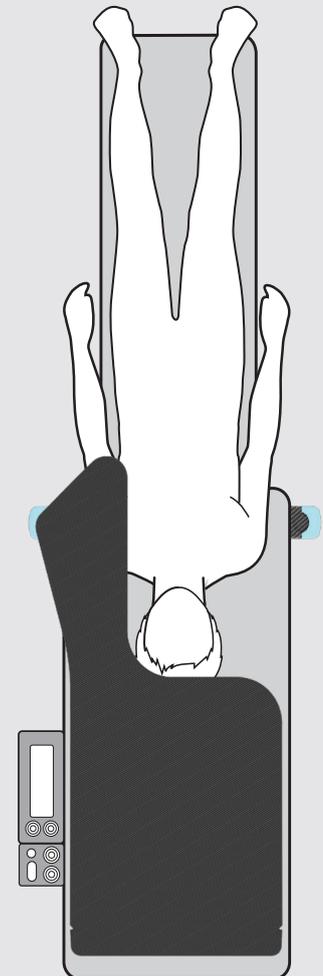

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mesa de trabajo estable y resistente

Alineación con sitio femoral

Puede adaptarse a cualquier mesa

Fácil de montar y desmontar

Fácil de colocar

Radiotransparente

Extensión opcional



Fácil de limpiar



RÁPIDO MONTAJE Y POSICIONAMIENTO




Bloqueo de la pata a la base

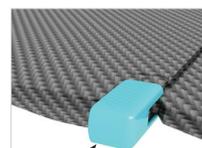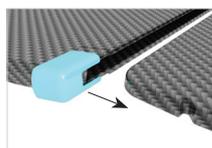

La Extension se une a la Plataforma

USO DEL SOPORTE DE COBERTURA CON LA ANTEGRADE IR PLATFORM

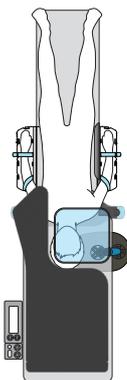

Lo ideal es utilizarla en combinación con el soporte de cobertura Adept Medical Drape Support; esta combinación de productos ofrece una comodidad óptima para el paciente al crear espacio debajo de la cobertura.

La colocación del soporte de cobertura dentro de la parte recortada de la plataforma que rodea la cabeza del paciente ofrece una mayor comodidad para este y proporciona una superficie que evita que la cobertura caiga.




COMPATIBLE CON ARMSURE*

Con los pacientes inquietos, la Antegrade IR Platform es compatible con ArmSure (AM0600), una solución completa de inmovilización del brazo.

***ARMSURE (AM0600) Y DRAPE SUPPORT (AM1000)** no se incluyen con la Antegrade IR Platform.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

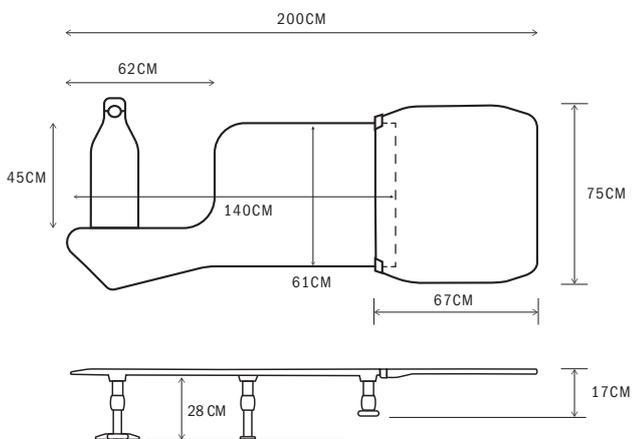

Código de producto:

Antegrade IR Platform: AM0440 | IR Platform Extension: AM0410

Antegrade IR Platform + Extension: AM0430

Peso Antegrade IR Platform: 4Kg

Peso IR Platform Extension: 3.6Kg

USOS

Radiología intervencionista

- Procedimientos vasculares a través del abordaje femoral anterógrado



EC REP

CE

REPRESENTANTE DE CE

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Para más información, visite:

www.adeptmedical.com/antegrade-ir-platform